

MICRO PERFORADOR CANULADO
BTR 2000
(CODIGO 2210)

Compuesto Por:
Pieza de mano Micro Perforador Canulado Cod. 2202
Fuente de control Cod. 2305

MANUAL DEL USUARIO



INBIOEL ARGENTINA
INGENIERIA BIOELECTRONICA

Contenido

1 Información de seguridad

- 1.1 Información general de seguridad**
- 1.2 Seguridad del paciente**
- 1.3 Responsabilidad del usuario**
- 1.4 Definición de símbolos**

2 Introducción

- 2.1 Uso previsto**

3 Puesta en marcha y utilización

- 3.1 Desembalaje e inspección**
- 3.2 Puesta en marcha del Micro Perforador Canulado BTR 2000**
 - 3.2.1 Conexión del equipo**
 - 3.2.2 Colocación de mechas**
- 3.3 Utilización**
 - 3.3.1 Funcionamiento básico**
 - 3.3.2 Procedimiento de apagado y desconexión del Micro Perforador Canulado BTR 2000**

4 Limpieza y esterilización

- 4.1 Limpieza**
- 4.2 Esterilización**

5 Reparación de averías y mantenimiento

- 5.1 Reparación de averías**
 - 5.1.1 Devolución del Micro Perforador Canulado BTR 2000**
- 5.2 Mantenimiento**
 - 5.2.1 Servicio**
 - 5.2.2 Comprobaciones periódicas de seguridad**
- 5.3 Eliminación del producto y accesorios**

6 Especificaciones

- 6.1.1 Eléctricas**
- 6.1.2 Medio ambientales**
- 6.1.3 Físicas**
- 6.1.4 Calificación del equipo**

1 Información de seguridad

1.1 Información general de seguridad

Esta sección contiene importante información relacionada con el uso general del **Micro Perforador Canulado BTR 2000**. A lo largo de este manual aparecerán otras importantes afirmaciones de seguridad, por lo tanto asegúrese de leer y comprender todo el texto.

1.2 Seguridad del paciente

El **Micro Perforador Canulado BTR 2000** solo puede utilizarse en los pacientes después de que el personal médico haya leído las instrucciones. Dado que es imposible excluir completamente la posibilidad de problemas técnicos, al usar el instrumento en pacientes, compruebe siempre que haya otro sistema preparado en condiciones para ser usado.

1.3 Responsabilidad del usuario

El usuario del producto es responsable del uso correcto del equipo durante la intervención quirúrgica.

¡Importante! Antes de proceder a su uso, lea este manual con atención, toda la información preventiva escrita en negrita y las especificaciones.

ADVERTENCIA: El Micro Perforador Canulado BTR 2000 debe ser manejado únicamente por personal calificado.








ADVERTENCIA: Peligro de explosión. No utilice el Micro Perforador Canulado BTR 2000 en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno o con óxido nitroso.

ADVERTENCIA: El Micro Perforador Canulado BTR 2000 no contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario en su interior.

ADVERTENCIA: Ajustar las mechas en el mandril únicamente con la herramienta de ajuste provista.

ADVERTENCIA: El Micro Perforador Canulado BTR 2000 es un equipo no estanco.

1.4 Definición de símbolos

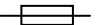Símbolo	Descripción
	Atención, Consulte las instrucciones de uso y documentos de acompañamiento. Este símbolo proporciona notificación de información importante.
	Terminal de tierra de protección.
	Parte aplicable del Tipo B contra descargas eléctricas y fugas de corriente.
	Parte aplicable del Tipo BF contra descargas eléctricas y fugas de corriente.
IP X1	Protección contra la penetración de agua. Equipo a prueba de goteo.
	“Encendido” (Conexión a la red).
	“Apagado” (Desconexión de la red).
	Tensión peligrosa.
	Fusible

2 Introducción

2.1 Uso previsto

El **Micro perforador canulado BTR 2000**, sumamente útil para el perforado de pequeñas piezas y para la colocación de kicsner. Tiene una excelente relación tamaño-torque y es de sencilla operación.

Este tipo de máquina es de la línea MICRO; generalmente usada en cirugía de pie, manos, máxilofacial, columna, etc.

Las revoluciones son variables desde 50 a 680 R.P.M.. Su reducido tamaño (32 mm. por 160 mm.) permite operar en zonas complejas. Su peso es de 350grs.

Principios y condiciones generales de funcionamiento

Su funcionamiento es el siguiente: conectar la pieza de mano a la fuente y ésta a la red (220v. ó 110v.), luego se acciona la llave interruptora de la fuente (POWER), y ya queda en condición de operación, se coloca con el control de la fuente la velocidad deseada y luego solo se acciona el pedal.

La pieza de mano junto con el cable de conexión debe ser esterilizados en óxido de etileno solamente.



3 Puesta en marcha y utilización

3.1 Desembalaje e inspección

Desempaque el **perforador canulado BTR 2000** y sus componentes. Si cualquiera de ellos faltase o estuviese defectuoso, póngase en contacto con el departamento de Servicio Técnico de INBIOEL ARGENTINA o con su representante local.

Lista de componentes

- 1 micro perforador canulado cod 2202
- 1 fuente de alimentación 2305
- 1 herramienta de ajuste de mandril
- 1 cable de alimentación
- 1 cable de conexión fuente – micro perforador
- 1 pedalera
- 1 Manual de usuario
- 1 Maletín para el almacenaje y transporte
- Mechas

3.2 Puesta en marcha del Micro perforador canulado BTR 2000

3.2.1 Conexión del equipo

1 Conecte el extremo hembra del cable de alimentación en la toma de CA del panel trasero de la fuente de alimentación (figura 1).



Figura 1: Conexión del cable de alimentación a la fuente.

2 Inserte el extremo hembra del cable de conexión fuente –micro perforador canulado en la toma de corriente del micro perforador canulado, ubicada en la base de la misma (figura 2).

Figura 2

3 Inserte el extremo macho del cable conexión fuente – micro perforador canulado a la toma ubicada en el frente de la fuente de alimentación (figura 3).



Figura 3

3.2.2 Colocación de herramientas

Sostenga firmemente la pieza de mano, con la otra mano sostenga la llave y desajuste como indica la (figura 1). Luego ingrese la mecha (figura 2) y con la llave vuelva a ajustar (figura 3) hasta que quede segura.

Figura 4: Secuencia de fotos de la colocación de una mecha

3.3 Utilización

3.3.1 Funcionamiento básico

¡Importante! Antes de proceder a su uso, lea en este manual con atención, toda la información preventiva escrita en negrita y las especificaciones.

ADVERTENCIA: El micro perforador canulado BTR 2000 debe ser manejada únicamente por personal calificado.

1. Coloque la herramienta que utilizara y conecte correctamente todos los cables de conexión.
2. Encienda la fuente de alimentación presionando el interruptor de encendido verde situado en el frente (figura 6) pasando de la posición O a I.



Figura 6: Encendido de la fuente de alimentación.

3. Tome firmemente con la mano hábil el micro perforador canulado 2106 y accione el pedal. La herramienta girará cada vez que accione el pedal a una frecuencia de X [Hz]. Utilícela de manera intermitente, accionando el pedal solo en momentos en los que se realizarán perforaciones o chequeos de funcionamiento.

¡Importante! Para la colocación de mecha, fresas, etc, utilice siempre la herramienta de ajuste incluida con el equipo.

ADVERTENCIA: Los equipo de Clase I, poseen ficha de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad **NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando esta ficha por otra de 2 espigas.

ADVERTENCIA: La instalación eléctrica debe estar provista de conductor a tierra. De no ser así realice la adecuación con personal capacitado.

ADVERTENCIA: Para velar por la seguridad del paciente, no sitúe el micro perforador canulado en ningún lugar donde pudiera caerse sobre este.

ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos debe utilizarse fresas, mechas, etc nuevas en cada cirugía.

3.3.2 Procedimiento de apagado y desconexión del Micro Perforador Canulado BTR 2000

Para el apagado y desconexión siga los siguientes pasos:

- a. Apague la fuente de alimentación presionando el interruptor de encendido verde situado en el frente pasando de la posición I a O.
- b. Desconecte el cable de alimentación de la red.
- c. Desconecte de la pieza de mano el extremo macho del cable de conexión fuente – Pieza de mano.
- d. Desconecte de la fuente el extremo hembra del cable de conexión fuente – Pieza de mano.
- e. Quite la fresa de la pieza de mano, invirtiendo el procedimiento de conexión de fresas.

4 Limpieza y esterilización

4.1 Limpieza

Micro Perforador canulado:

Para la limpieza previa a la esterilización se recomienda:

- Usar guantes protectores.-
- Usar gasa, algodón o un cepillo impregnado con alcohol.-
- No sumergir la pieza de mano en ningún medio líquido.-
- Secar la pieza de mano con una gasa seca y limpia.-

Fuente de control 2305 y cables de conexión

Precaución: No permita que ningún líquido entre en contacto con la Fuente de control 2305.

Humedezca un paño con un producto de limpieza no abrasivo y frote ligeramente las superficies. No pulverice ni derrame ningún líquido sobre el instrumento o sus accesorios.

4.2 Esterilización

Se debe esterilizar por óxido de etileno el micro perforador canulado 2202, el cable de conexión micro perforador/fuente, la herramienta de ajuste y las mechas, fresas, etc antes de cada cirugía.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión. No utilice el micro perforador canulado BTR 2000 en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno o con óxido nitroso.

5 Reparación de averías y mantenimiento

5.1 Reparación de averías

ADVERTENCIA: El micro perforador canulado BTR 2000 no contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario en su interior. El equipo debe ser reparado solo por personal calificado.

Fusibles:

La fuente de alimentación posee un fusible ubicado en la toma de CA (figura 7).

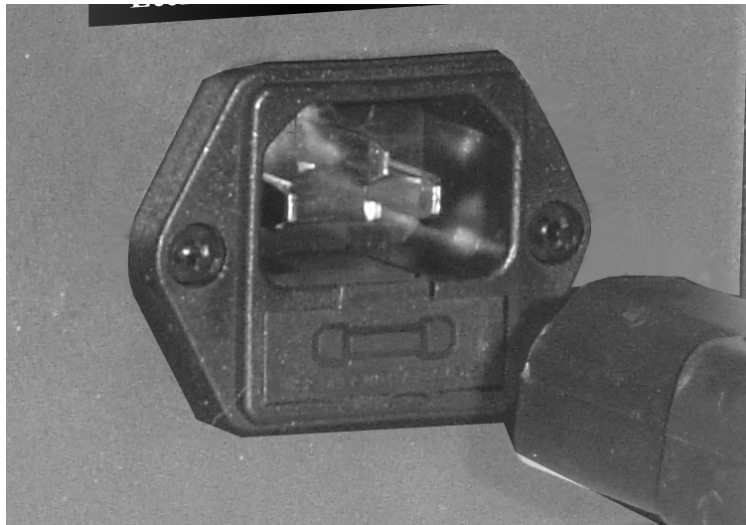


Figura 7: Ubicación del fusible de la fuente de alimentación.

Tipo:

Si se le presenta cualquier problema mientras utiliza el **micro perforador canulado BTR 2000** y no es capaz de corregirlo, póngase en contacto con el personal de servicio calificado o con su representante local de INBIOEL ARGENTINA.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el dispositivo cuando se proceda al cambio de fusibles, el peligro de electrocución puede dañar severamente la salud.

ADVERTENCIA: No introduzca ningún objeto en los contactos o en la fuente de alimentación.

ADVERTENCIA: Nunca toque los terminales del dispositivo, ni póngalos en situación de "corto circuito".

5.1.1 Devolución del BTR 2000

Póngase en contacto con el departamento de Servicio técnico de INBIOEL ARGENTINA o con su representante local para obtener las instrucciones de transporte. Empaque el **micro perforador canulado BTR 2000** en su caja original. Si no puede disponer de una caja original, utilice una caja adecuada con material de embalaje apropiado para protegerlo durante su transporte. Devuelva la **micro perforador canulado BTR 2000** utilizando cualquier forma de envío siempre y cuando un justificante certifique la entrega.

5.2 Mantenimiento

5.2.1 Servicio

El Micro Perforador Canulado **BTR 2000** no precisa ningún servicio ni ninguna calibración de rutina. Si es necesario el servicio, póngase en contacto con personal de servicio calificado o con su representante de INBIOEL ARGENTINA.

5.2.2 Comprobaciones periódicas de seguridad

A continuación se enumeran las comprobaciones de seguridad que deberán ser realizadas por una persona calificada para llevarlas a cabo.

- Revise el equipo por si sufriera daños mecánicos o funcionales.
- Asegúrese de que las etiquetas de seguridad sean legibles.
- Verifique que el dispositivo funciona correctamente según se describe en este manual del usuario.

Si el equipo no funciona adecuadamente o falla cualquiera de las pruebas anteriores, no intente reparar el mismo. Devuelva el equipo al fabricante o a su distribuidor en caso de que sea precisa cualquier reparación.

ADVERTENCIA: Nunca abra el dispositivo, la existencia de riesgo de electrocución pueden poner en peligro la salud.

ADVERTENCIA: No están permitidas modificaciones de ningún tipo en el equipo.

ADVERTENCIA: Cualquier modificación que se le haga al equipo, debe ser sometido a una inspección apropiada para asegurarse el correcto cumplimiento de las normas de seguridad, y solo así su uso posterior
--

5.3 Eliminación del producto y accesorios

Los productos y accesorios descriptos en este manual no deben ser eliminados junto con los residuos domésticos. Siga las normativas u ordenanzas locales para su eliminación. En caso de dudas consulte a INBIOEL ARGENTINA o póngase en contacto con su distribuidor local.

INBIOEL ARGENTINA

Calle 24 N° 947 / Mercedes (B) / Tel/Fax: (+54) 02324-422 306

E-Mail: inbioelargentina@speedy.com.ar

6 Especificaciones

6.1.1 Eléctricas

Micro Perforador Canulado 2202:

- Voltaje: 38 V.C.C
- Potencia: 50 V.A

Fuente de alimentación 2305:

- Voltaje entrada: C.A. 220 V $\pm 10\%$
- Voltaje de salida: 38 V
- Frecuencia: 50Hz ± 1 Hz
- Potencia: 50V.A

6.1.2 Medioambientales

Funcionamiento:

- Temperatura: 0°C a 55°C
- Humedad: 15% a 100% de humedad relativa
- Presión atmosférica: 500hPa a 1060hPa

Transporte y almacenamiento:

- Temperatura: -40°C a 70°C
- Humedad: 15% a 100% de humedad relativa
- Presión atmosférica: 500hPa a 1060hPa

6.1.3 Físicas

Micro Perforador Canulado 2202

- Peso: 350 gm
- Medidas: 32mm x 160 mm

Fuente de alimentación 2305

- Peso: 2 kg
- Medidas: 22cm x 19cm x 6cm

6.1.4 Calificación del equipo (IRAM 4220-1:2002)

- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Equipo Clase I
- Grado de protección contra el ingreso perjudicial de agua:
 - Micro Perforador canulado 2202: equipo a prueba de goteo IPX1
 - Fuente de alimentación 2305: equipo sin protección contra el ingreso de agua.
- Grado de protección contra descargas eléctricas: Equipo tipo B.
- Modo de funcionamiento: Funcionamiento intermitente.
 - Encendido: 5min
 - Apagado: 5min
 - Tiempo total no más de 45 minutos.